


Manufacturing Process –


Preparing the Impression

- the first important step towards manufacturing a precision earmold
- the prepared impression is the key to success
- the wax coating influences the quality of the finished earmold concerning comfort and sealing
- is the basis for all earmold manufacturing processes

Please also consider our cedis Profi product range for work safety, hand and skin care, which is part of our cedis care program.

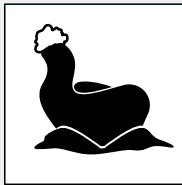

- 1.** Check the impression. Pay attention to exact application and the length of the auditory canal

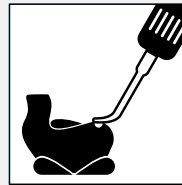


- 4.** Level irregularities, holes or scratches with correcting wax




- 2.** Trim the auditory canal and cymba of the impression



- 5.** Apply a thin and even interlayer (wax or lacquer L)

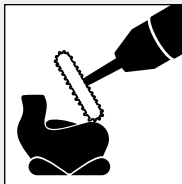

- 3.** Round all edges and interfaces and smooth surface gently

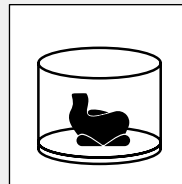


- 6.** Place the impression securely in a duplicating flask/investment form suitable for the chosen manufacturing process

Prozessbeschreibung – Abdruckvorbereitung

- der erste wichtige Schritt für eine gute Otoplastik
- der bearbeitete Abdruck stellt den Schlüssel zum Erfolg dar
- die Trennschicht beeinflusst die Qualität der späteren Otoplastik in puncto Tragekomfort und Abdichtung
- ist die Basis für alle Otoplastik-Herstellungsprozesse

Bitte beachten Sie auch unsere cedis Profi-Linie zu Arbeitsschutz, Hand- und Hautpflege aus dem cedis Pflegeprogramm.

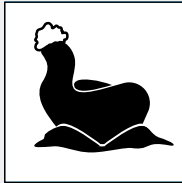


- 1.** Abdruck kontrollieren. Achten Sie auf die exakte Applikation und die Gehörgangslänge.



- 2.** Gehörgang und Cymba des Abdrucks beschneiden.




- 3.** Kanten von Schnittstellen abrunden und Oberfläche sanft glätten.

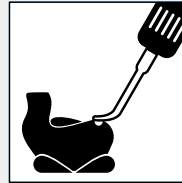

- 4.** Unebenheiten, Löcher, Rillen etc. mit Korrekturwachs ausgleichen.



- 5.** Trennschicht (Wachs oder Lack L) dünn und gleichmäßig auftragen.

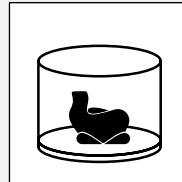


- 6.** Abdruck in der passenden Kuvette/Einbettform des gewählten Herstellungsprozesses fixieren.


Processus de fabrication – Préparation de l'impression

- le premier pas important pour un embout de haute qualité
- l'embout façonné comme clé du succès
- la couche de cire influence la qualité du futur embout, tant pour le confort que l'étanchement
- est la base pour tous les processus de production des embouts

Veuillez noter notre gamme cedis Profi pour la sécurité au travail, les produits pour les mains et la peau de la gamme de soins cedis.

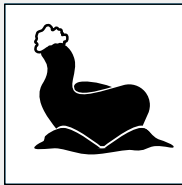

- 1.** Contrôlez l'impression. Faites attention à l'application exacte et la longueur du conduit auditif.

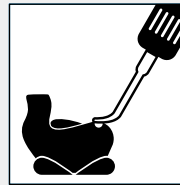


- 4.** Éliminez les irrégularités, trous, cannelures etc. à l'aide de la cire de correction.




- 2.** Coupez ensuite le conduit auditif et la cymba de l'impression.



- 5.** Veillez à appliquer la cire de manière à former une couche de séparation fine et régulière.

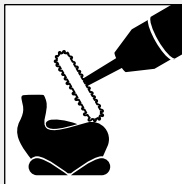

- 3.** Arrondissez les arêtes de coupe et polissez la surface avec précaution.

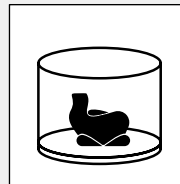

- 6.** Fixez enfin l'empreinte dans la cuvette/le récipient adéquat pour le processus de fabrication choisi.